

## Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

- Výrobek je koncipován pro intenzivní čištění pokožky. Není určen pro každodenní ošetřování, nýbrž pro použití maximálně 2x týdně.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům, např. v kosmetických studiích. Nehodí se pro lékařské ošetření.
- Výrobek používejte pouze v suchých vnitřních prostorech.

### Přístroj nepoužívejte ...

- ... přímo na otevřené rány, popáleniny, kožní vyrážky, otoky nebo podrážděnou kůži, lupénku, lézy, infekce (opary), jaterní skvrny, bradavice,
- ... na oční víčka, rty, prsní bradavky, genitálie,
- ... po slunění (počkejte min. 1-3 dny),
- ... při kožních chorobách, např. kuperóza, rosacea,
- ... při poruchách prokrvení, cukrovce, tuberkulóze, nádorech, pohmožděninách, neuralgii trojklaného nervu, onemocnění štítné žlázy, operu,
- ... po operaci,
- ... při užívání lékářem předepsaných medikamentů na kůži v posledních 6 měsících,
- ... po ozařování nebo chemoterapii v posledních 3 měsících,
- ... na tělesných partiích s potenciálně zhoubnými nádory kůže,
- ... během těhotenství,
- ... při bolestech nejasné příčiny.

V případě pochybností se obraťte na svého lékaře.

### Pozor na nesprávnou aplikaci

- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. Tam je pokožka velmi jemná a citlivá. Tuto oblast neošetřujte. Nástavce netlačte na pokožku příliš silně.
- Neseťvávejte se sacím nástavcem na jednom místě pokožky, ale rovnoměrně přejíždějte přístrojem po pokožce, protože jinak se mohou tvořit modřiny.
- Osoby s citlivou pleťí by mohly na ošetření přístrojem reagovat otokem nebo podrážděním pleťí. Vyzkoušejte proto přístroj nejdřív na méně citlivém místě, např. na spodní straně předloktí.
- Ze začátku používejte přístroj jen krátkou dobu a s malou intenzitou, abyste minimalizovali případné reakce. Aplikace by zpočátku neměla překročit 120 sekund, později 5 minut.

### Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládní přístroje

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje, a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Tento přístroj se nesmí používat u malých dětí, protože mají velmi citlivou pokožku.
- Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří případ, když jsou děti starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.
- Dbejte na to, aby se děti nemohly dostat k obalovému materiálu a malým dílům. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Výrobek nabíjejte pouze v suchých vnitřních prostorech. K nabíjení používejte pouze vhodný USB síťový adaptér (viz „Technické parametry“, není součástí dodávky) a přiložený micro USB nabíjecí kabel.
- Přístroj nenabíjejte v blízkosti vody. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami, pokud je připojený k síti. Výrobek neponožte během procesu nabíjení do vody ani jiných kapalin, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Pokud by přístroj během nabíjení spadl do vody, nesahejte na něj ani se jej nepokoušejte z vody vytáhnout! V takovém případě okamžitě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Nechte přístroj, USB nabíjecí kabel a síťový adaptér zcela uschnout, než jej opět připojíte do zásuvky.
- Nenabíjejte přístroj ve venkovním prostoru ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.
- K nabíjení připojujte přístroj pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud se během nabíjení vyskytnou poruchy, jakmile je přístroj plně nabitý, v případě bouřky nebo před čištěním přístroje. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za síťový kabel.

- Používejte pouze přiložený USB nabíjecí kabel a síťový adaptér, který odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Položte USB nabíjecí kabel tak, aby nebylo možné přístroj nechtěně strhnout dolů.
- USB kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození nebo spadl na zem.
- V případě poškození USB nabíjecího kabelu nebo síťového adaptéru je dále nepoužívejte k nabíjení přístroje.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neotevírejte kryt přístroje. Případné opravy přístroje, nabíjecího kabelu nebo síťového adaptéru nechte provádět pouze v odborném servisu, vyhnete se tak rizikům.

### Nebezpečí poranění

- Přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí demontovat svépomocí.
- Výrobek se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat. Hrozí nebezpečí výbuchu!

### Věcné škody

- Výrobek neponožte do vody ani do jiných tekutin. Chraňte jej také před kapající a stříkající vodou.
- Po každém použití přístroj důkladně vyčistěte, jak je popsáno v kapitole „Čištění“, abyste odstranili usazeniny tuku a jiné zbytky.
- K čištění nepoužívejte žravniny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

### Likvidace

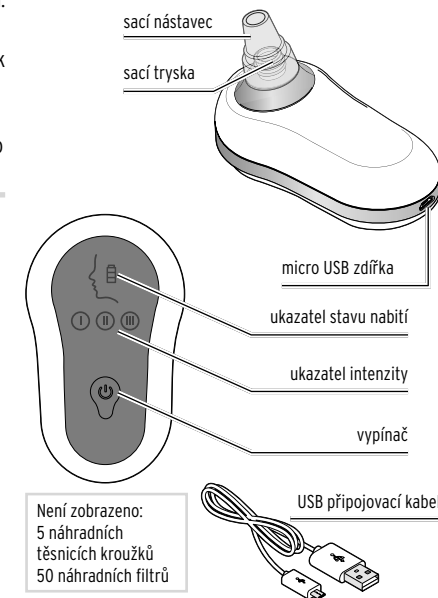


**Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu.

Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

**Pozor!** Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně likviduje přístroj i akumulátor.

### Přehled (rozsah dodávky)



### sací nástavce



### Technické parametry

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Model:                                | 653 374                         |
| Akumulátor: (testováno podle UN 38.3) | lithium-iontový 3,7 V / 450 mAh |
| USB port:                             | Jmenovitá energie: 1,665 Wh     |
| Doba nabíjení:                        | 5 V $\square$ 1000 mA           |
| Doba provozu:                         | cca 2 hodiny                    |
| Třída ochrany:                        | cca 1 hodina                    |
| Okolní teplota:                       | III $\square$                   |
| Made exclusively for:                 | +10 až +40 °C                   |

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.

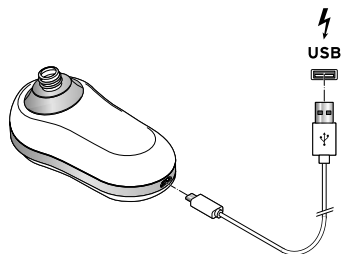


## Nabíjení akumulátoru

Akumulátor je nutno před prvním uvedením do provozu úplně nabít. Doba nabíjení: cca 2 hodiny. K tomu účelu musí být přístroj vypnutý. Přístroj během nabíjení nepoužívejte.

### VAROVÁNÍ – ohrožení života elektrickým proudem

Nenabíjejte přístroj přímo vedle umyvadla naplněného vodou nebo nad ním.



1. Připojte USB přípojovací kabel k přístroji a k vhodnému USB síťovému adaptéru (viz „Technické parametry“).
2. Zastrčte síťový adaptér do zásuvky.


Během procesu nabíjení bliká ukazatel stavu nabíť. Jakmile je akumulátor plně nabitý, ukazatel trvale svítí.

3. Po nabíť vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a USB přípojovací kabel z přístroje.

Max. doba nabíjení: cca 2 hodiny.

Doba provozu s plně nabitým akumulátorem: cca 1 hodina.

Pokud se přístroj během používání vypne z důvodu nedostatečné kapacity akumulátoru, musí se akumulátor nejprve plně nabít, než může být přístroj dále používán.

 Aby byla zachována plná kapacita akumulátoru, měli byste jej nabíjet i v případě nepoužívání každé 2 až 3 měsíce.

- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 °C do +40 °C.

## Použití

### POZOR na podráždění pleti

- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti očí. Oblasti očí se vyhněte.
- Osoby s citlivou pletí by mohly na ošetření přístrojem reagovat otokem nebo podrážděním pleti. Nejdříve si přístroj vyzkoušejte na méně citlivém místě.
- Ze začátku používejte přístroj jen krátkou dobu a s malou intenzitou, abyste minimalizovali případné reakce. Aplikace by zpočátku neměla na všech částech obličeje překročit 2 minuty, později 5 minut.
- Nesetrvávejte s přístrojem na jednom místě, abyste se vyhnuli podráždění kůže.

### Před prvním použitím

Nejdříve si vyzkoušejte přístroj a reakci Vaší pokožky na méně citlivém místě, např. na spodní straně předloktí. Poté počkejte 30 minut, zda se neobjeví nějaká reakce pokožky, než začnete s vlastním používáním.

### Volba sacího nástavce

#### Mikrodermabraze

Při mikrodermabrazi se jemně odstraňuje horní zrohovatělá vrstva kůže jako při peelingu. Odumřelé kožní buňky jsou odstraněny, hrubé povrchy a drobné vrásky vyhlazeny, kůže působí svěžejším a hebkým dojmem.

#### Vakuové ošetření

Vakuovým ošetřením jsou ...

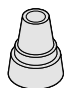
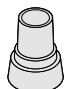
... hloubkově odstraněny nečistoty,

... odsáty odumřelé kožní buňky a

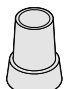
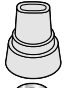

... podpořeno prokrvení pro osvěžení pleti.

Pro mikrodermabrazi používejte nástavec se zapuštěným kovovým kroužkem.

Pro vakuové ošetření můžete používat všechny čtyři přiložené sací nástavce.

- ▷  K čištění ucpaných pórů při nízké sací síle. Ideální pro navyknutí kůže na začátku používání a také pro jemnou, citlivou kůži.
- ▷  K čištění ucpaných pórů a při akné. Použití při střední sací síle.

**Při čištění zanícených puchýřků akné** očistěte nástavec **po každém puchýřku**, abyste zabránili dalšímu šíření akné.

- ▷  Pro důkladné ošetření při maximální sací síle. Ideální pro odstranění černých teček u mastné pleti.
- ▷  Pro vyhlazování vrásek, masírování a zpevnění kůže.
- ▷  Pro mikrodermabrazi.


### Výměna sacího nástavce

- ▷  V případě potřeby vytáhněte předmontovaný nástavec z přístroje rovně směrem nahoru a nasadte zvolený nástavec.

## Použití

### Příprava

1. Obličej si důkladně umyjte a dobře osušte. Pleť musí být čistá, suchá a zbavená pudru, krémů apod.
2. **Pouze při čištění ucpaných pórů:** Pro otevření pórů navlhčete ručník teplou vodou a přiložte ho na několik minut na obličej.



 Při prvních 2-3 použitích ...  
... použijte malý kulatý nástavec s nízkou sací silou.



... nastavte na přístroji nejnižší stupeň intenzity .

Nejprve proveďte krátkou zkoušku na malém kousku kůže. Pokud se bezprostředně poté nebo později objeví jakékoliv potíže, ihned ošetřování ukončete. Případně se poraďte se svým lékařem.


Kompletní ošetření by nemělo zpočátku trvat déle než 2 minuty, později 5 minut. Přístroj používejte maximálně 2x týdně.

### Zapnutí přístroje a volba stupně intenzity

- ▷ K zapnutí přístroje podržte vypínač  stisknutý. Přístroj se vždy spustí ve nízkém stupni intenzity. Na displeji se zobrazuje .

- ▷ Stiskněte vypínač , příp. několikrát krátce, až dosáhnete požadované intenzity.
- ▷ Vypněte přístroj stisknutím a podržením vypínače .

### Ošetřování obličeje

1.  Zapněte přístroj a přiložte ho na svůj obličej tak, aby sací nástavec přiléhá ke kůži a aby žádný vzduch nemohl unikat ven ani

vnikat dovnitř a abyste cítili sací sílu. Přitom přístrojem stále pohybuje - nesetrvávejte na jednom místě, protože jinak se mohou tvořit modřiny.



2. Přejíždějte sacím nástavcem po příslušném kousku pokožky ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku - zpočátku 2-4x a poté 4-6x, jakmile si vaše pokožka na ošetřování zvykne. Druhou rukou pokožku v případě potřeby napínejte. Kopírujte tvar svého obličeje. Nepřítlačujte příliš silně! V oblasti očí postupujte obzvláště opatrně!

### Po ošetření

- ▷ Opláchněte si obličej chladnou až vlažnou vodou. V případě potřeby použijte čisticí pleťovou vodu se zpevňujícím účinkem pro odstranění zbytků a opětovné uzavření otevřených pórů.
- ▷ Naneste chladivou a uklidňující pleťovou masku nebo hydratační krém.
- ▷ Vaše pleť bude po ošetření jemnější a citlivější než obvykle. Vyhněte se přímým slunečním paprskům. V případě potřeby naneste krém s vysokým ochranným faktorem proti slunci.
- ▷ Z hygienických důvodů přístroj po každém použití důkladně očistěte, viz popis v kapitole „Čištění“.  
Tím odstraníte nánosy mastnoty a jiné zbytky.

## Možné vedlejší účinky

Pokud postupovat podle tohoto návodu a sledovat reakce své kůže, jsou komplikace nebo vedlejší účinky velmi nepravděpodobné. Konečně každý člověk reaguje na mechanické působení čističe pórů jinak. Čistič pórů může zlepšit prokrvení, při nadměrném používání však může způsobit alergické reakce, zarudnutí kůže, prasknutí žilek nebo modřiny.

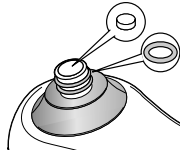
Pokud tyto projevy nezmizí po jednom/dvou dnech nebo pokud se objeví další potíže, poraďte se se svým lékařem.

## Čištění

- ▷ Z hygienických důvodů přístroj hned po použití očistěte, abyste odstranili usazeniny mastnoty a jiné zbytky.

**Při čištění zanícených puchýřků akné** očistěte nástavec **po každém puchýřku**, abyste zabránili dalšímu šíření akné.

1. Přístroj vypněte.
2. Sejměte sací nástavec, důkladně ho omyjte v jemném mýdlovém roztoku a poté ho důkladně opláchněte pod tekoucí teplou vodou. Před opětovným použitím nebo uloženíím jej nechte dobře oschnout.

3.  Vyjměte pěnový filtr ze sací trysky a vypláchněte jej. Než jej budete znovu používat, nechte jej dobře oschnout.

- ▷ K přístroji jsme Vám přiložili 50 náhradních filtrů. Pokud je filtr poškozený nebo znečištěný, vyměňte ho.

- ▷ Těsnicí kroužky obvykle není nutné měnit. Můžete je však vyjmout za účelem důkladného vyčištění. Pokud je těsnicí kroužek poškozený, nahraďte ho jiným ze sady těsnících kroužků.

4. Samotný přístroj a zejména destičku kolem sací trysky důkladně očistěte vlhkým hadříkem. Vnitřek trysky můžete vyčistit mírně navlhčenou vatovou tyčinkou.