




Dodržujte návod k použití!



Gelové obklady

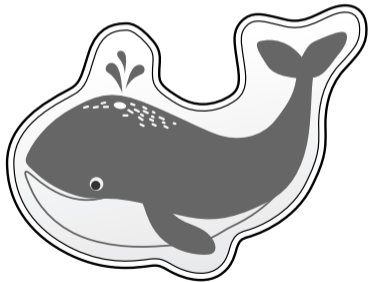

CS Návod k použití

Vážení zákazníci,

pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Váš tým Tchibo

Použití

Obklady nikdy nepokládejte přímo na pokožku, ale vložte mezi obklad a pokožku vždy měkký, suchý hadřík nepouštějící vlákna (např. malý ručník pro hosty atd.).

Použití za tepla - k podpůrné léčbě bolesti břicha, natažených svalů nebo bolesti svalů (výborně pomáhají i u studených rukou a nohou)

- ▷ Obklady položte asi na 5 minut do hrnce s vodou horkou max. 60 °C. **Voda nesmí vařit!** V hrnci musí být dostatek vody, aby obklady nepřišly do styku s horkým dnem hrnce. Obklady vyjměte dřevěnými kleštěmi apod., ne holými prsty - nebezpečí opaření! Než začnete obklady aplikovat na Vašem dítěti, nechte je nejdřív dostatečně vychladnout.

Použití za studena - k podpůrné léčbě vyvrtnutí, naraženin, otoků, pohmožděnin, bolestí zubů, hlavy a bodnutí hmyzem

- ▷ Gelové obklady položte na cca dvě hodiny do lednice (nikoli do mrazničky!) Poté je můžete okamžitě použít.

Čištění / skladování

- V případě potřeby obklady otřete vlhkým hadříkem. Obklady uchovávejte v chladu, suchu a bez přímého slunečního záření.



Tento obklad odpovídá směrnici 93/42/EHS
o zdravotnických prostředcích.



Výrobce: Handelshaus Dittmann GmbH
Kissinger Str. 68
97727 Fuchsstadt, Germany



Datum výroby: 2019-03
(den/měsíc)



Kód šarže: V2019375307

Ize používat od: +5 °C do +40~45 °C (teplotní rozsah)

Číslo výrobku: 375 307

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

K použití za tepla nebo za studena. Mohou zmírňovat obtíže např. při bolestech břicha, namožených svalech, bolestech svalů, otocích, po bodnutí hmyzem, při vyvrtnutí, naraženinách, pohmožděninách, bolestech zubů a bolestech hlavy.

Obklady nepoužívejte na poraněné kůži, při Raynaudovu syndromu, a zároveň s užitím prostředků proti bolesti.

Teplé gelové obklady nepoužívejte při zvýšené tělesné teplotě ani u zánětů. Zde je dovoleno obklady používat jen k ochlazování.

NEBEZPEČÍ pro děti

- **Nepoužívat u malých dětí k ulehčení prořezávání zubů!** Dbejte na to, aby děti do gelových obkladů nekousaly ani je nežvýkaly. Gel v obkladech není jedovatý, ale opatřen hořkou příchutí, aby bylo zajištěno, že dětem v případě prokousnutí obkladu nebude chutnat a proto ho nespolknou, ale rychle vyplivnou.
- Výrobek není hračka pro děti. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

Gelové obklady smí být používány jen pod dohledem dospělé osoby.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před popálením a podchlazením

- Gelové obklady nesmí být používány, pokud osoba není schopna správně vnímat teplo nebo chlad. Malé děti reagují na teplo a chlad citlivěji. Určitá onemocnění, jako např. cukrovka, jsou doprovázena poruchami vnímání teploty. Postižení nebo nemocní nemusí být schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo nebo příliš chladno. Nepoužívejte proto tento výrobek u dětí mladších 3 let, nemohoucích, nemocných, popř. u osob, které nejsou schopny vnímat teplo nebo chlad.

Pokud máte pochybnosti, jestli Vašemu dítěti používání dělá dobře, nebo při potížích s krevním oběhem, konzultujte napřed svého lékaře.

- Abyste zabránili popálení nebo podchlazení kůže, vyzkoušejte teplotu před použitím na vnitřní straně zápěstí.

Nezapomínejte, že již při teplotách kolem 41 °C mohou vznikat popáleniny, což závisí také na délce používání! Obklady nikdy nepokládejte přímo na pokožku, ale vložte mezi obklad a pokožku vždy měkký, suchý hadřík nepouštějící vlákna (např. malý ručník pro hosty atd.).

- Obklady zchlazujte v ledničce, nikoli v mrazicí přihrádce nebo v mrazničce. Obklady zchlazené v mrazicí přihrádce nebo v mrazničce by případně mohla již po několika minutách používání způsobit omrzliny!
- Při ochlazování v oblasti hlavy nesmí být teplota příliš nízká. Zchlazené obklady nenechávejte přiložené nepřetržitě déle než po dobu přibližně 10 minut. Nebezpečí podchlazení!
- Obklady ztrácejí v průběhu let na objemu. Jakmile se objem zřetelně snížil, vyměňte výrobek za nový.
- Po použití obkladů dejte tělu dostatek času na to, aby si odpočinulo. Až potom si můžete teplý nebo studený obklad opět přiložit.
- Obklady jsou určeny pouze k vnějšímu použití. Obsah se nesmí

požívat. Pokud přijde kůže do kontaktu s obsahem obkladu - např. při poškození fólie - omyjte postižené části kůže pod tekoucí vodou.

POZOR na věcné škody

- Gelové obklady nepřehřívejte a nepodchlazujte, mohly by se tím poškodit.
- Obklady udržujte mimo dosah špičatých a ostrých předmětů.
- Poškozený obklad nechte před kontaktem ochladit na pokojovou teplotu. Pak se již nesmí používat ani opravovat nebo modifikovat.
- **Není vhodné k ohřívání v mikrovlnné troubě nebo v pečicí troubě.**
- Gelové obklady nedávejte do mrazničky. Nesmí být vystaveny teplotám pod 0 °C.
- Na gelové obklady nevyvíjejte žádný tlak.

Likvidace

- Výrobek zlikvidujte dle platných zákonů a předpisů.
Informace Vám poskytne Vaše obecní nebo městská správa.