


Masážní přístroj na nohy

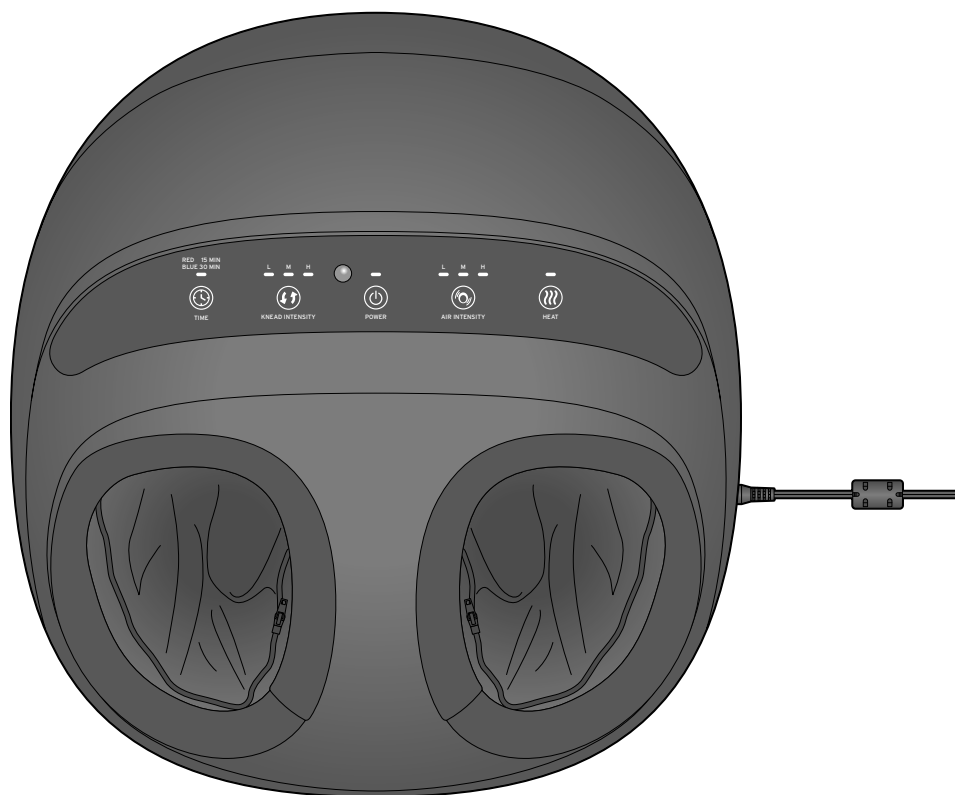

Vážení zákazníci,

ve Vašem novém masážním přístroji na nohy se nacházejí otočné masážní hlavy a vzduchové tlakové komory, které generují tlakové a masážní pohyby pro masáž reflexních zón na nohou.

Masážní přístroj na nohy může pomoci ...

- ... zlepšit průtok krve v nohách,
- ... podpořit regeneraci buněk,
- ... revitalizovat a povzbudit nohy,
- ... uvolnit napětí.

V tomto návodu je popsáno, jak masážní přístroj bezpečně a správně používat. Mějte na paměti, že špatně provedená nebo příliš dlouho trvající masáž může vést místo k uvolnění ke ztuhnutí svalů.

Obsah

3	K tomuto návodu	9	Výměna baterie
3	Bezpečnostní pokyny	10	Čištění a uchovávání
6	Přehled (rozsah dodávky)	11	Závada / řešení
8	Uvedení do provozu	11	Technické parametry
8	Použití	12	Likvidace
8	Zapnutí a vypnutí		
8	Nastavení časovače		
9	Nastavení rychlosti masáže nohou		
9	Nastavení intenzity komprese vzduchu		
9	Zapnutí a vypnutí funkce zahřívání		
9	Použití dálkového ovládání		

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Výstražná hesla v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Masážní přístroj na nohy je určen k relaxačním masážím nohou. Dokáže podpořit průtok krve v nohách a uvolnit napětí.

Výrobek je určen pro soukromou potřebu a není vhodný ke komerčním, terapeutickým ani lékařským účelům.



Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.

Nepoužívejte jej např. v koupelně nebo sauně, abyste se vyvarovali ohrožení.

Výrobek se nesmí používat u zvířat.

Přístroj nepoužívejte ...

- ... při onemocnění nebo poranění nohou (např. otevřené rány, bradavice, mykóza, vyrážka, oteklé nebo zanícené nohy),
- ... při onemocnění dolních končetin (např. zánět žil, křečové žíly),
- ... při vysokém krevním tlaku nebo abnormálním krevním tlaku, osteoporóze, diabetu nebo trombóze,

... pokud trpíte nějakou závažnou nemocí nebo jste po operaci nohy,

... pokud nosíte kardiostimulátor,

... pokud trpíte srdečním onemocněním nebo pokud máte zhoubný nádor,

... pokud máte poruchy prokrvení nebo neurologická omezení,

... když se necítíte dobře,

... při bolestech z neznámé příčiny,

... u osob, které nejsou schopny vnímat teplo.

Malé děti reagují na teplo citlivěji.

Užívání léků nebo určitá onemocnění, jako je např. cukrovka, mohou být doprovázeny poruchami vnímání tepla.

Postižení nebo nemocní nemusí být v některých případech schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo.

... u dětí mladších 3 let, nemohoucích, nemocných, popř. osob, které jsou na teplo necitlivé.

V případě pochybností se před použitím přístroje vždy nejdříve poradte se svým lékařem!

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.
Dálkové ovládání je vybaveno knoflíkovou baterií. Při požití knoflíkové baterie může během pouhých 2 hodin dojít k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k úmrtí. Nové, ale i použité baterie udržujte mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie správně nezavírá, výrobek již dále nepoužívejte a udržujte ho mimo dosah dětí. Jestliže se domníváte, že mohlo dojít k požití baterie nebo jejímu proniknutí do těla jiným způsobem, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ...
 - ... omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo ...
 - ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou ...
 - ... pod neustálým dohledem nebo
 - ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a ...
 - ... pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Výrobek a síťový adaptér ani připojovací kabel neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nedotýkejte se zařízení vlhkými rukama.
- Síťový adaptér připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá „Technickým parametrům“. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.

- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
 - ... pokud během provozu dojde k poruše,
 - ... po použití,
 - ... za bouřky
 - ... a než začnete přístroj čistit.Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dohledu.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud samotný přístroj, síťový adaptér nebo připojovací kabel vykazují zjevné vady nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny.
Je-li připojovací kabel poškozený, nesmíte jej sami opravovat ani měnit. Případné opravy přístroje nebo připojovacího kabelu nechte provádět jen v odborném servisu, abyste zabránili ohrožení.
- Výrobek se smí používat pouze s přiloženým síťovým adaptérem.
- Nevkládejte do otvorů přístroje žádné předměty.
- Před každým použitím zkontrolujte, že obě textilní vložky ve vykrojeních na nohy nevykazují známky opotřebení nebo poškození. Pokud jsou takové známky patrné, nesmí být masážní přístroj na nohy dále používán.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pozor! Lithiové baterie mohou explodovat, pokud jsou vloženy nesprávně. Při vkládání baterií proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie (viz „Technické parametry“).
- Přístroj během provozu nezakrývejte (např. dekou nebo ručníkem).
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti benzínu ani jiných hořlavých látek.

Výstraha před nebezpečím poranění



- Připojovací kabel ved'te tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.
- Pokud by některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody


- Používejte přístroj pouze vsedě. Když máte nohy zastrčené v přístroji, nevstávejte.
- Přístroj je konstruován pro provoz v trvání maximálně 30 minut. Před opětovným použitím nechte přístroj po dobu minimálně 30 minut vychladnout na okolní teplotu.
- Chraňte baterie/akumulátory před nadměrným teplem.
Baterii z dálkového ovládání vyjměte, pokud je vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nenaruší nebo nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky přístroje. Abyste zabránili nežádoucím stopám na podkladech, položte pod výrobek případně neklouzavou podložku.

- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.


Přehled (rozsah dodávky)

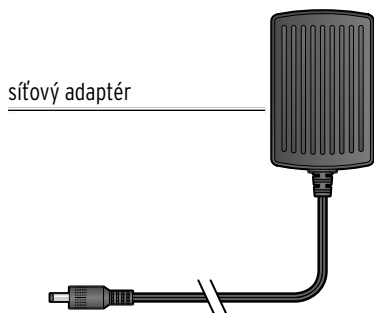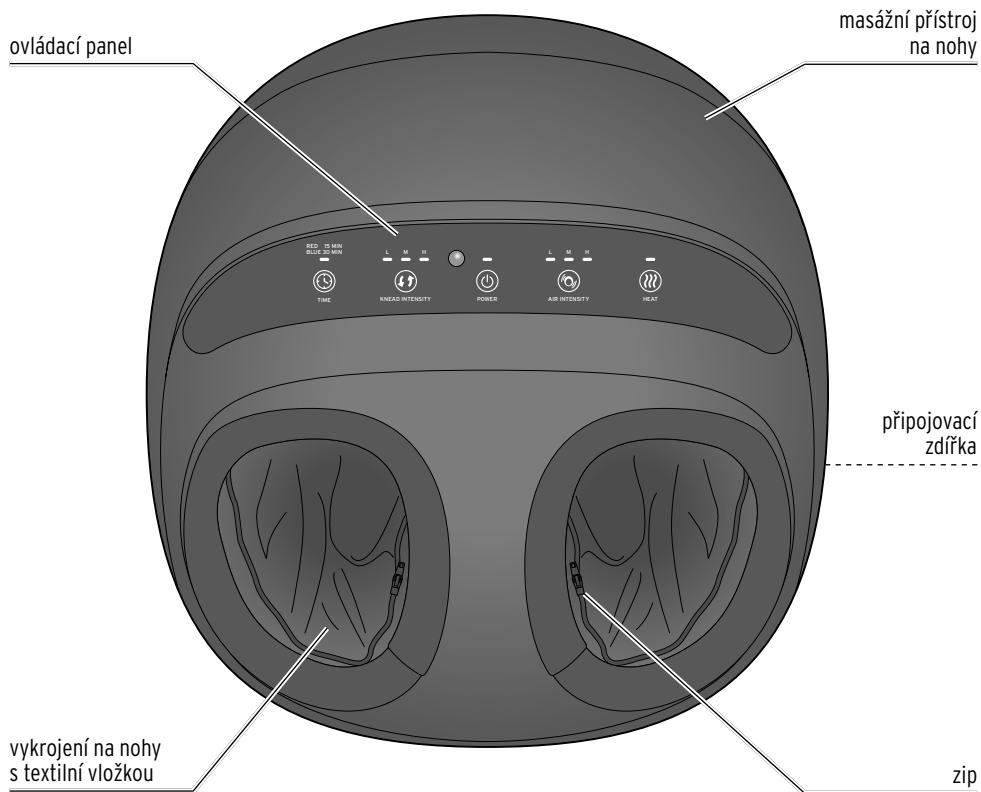

dálkové ovládání

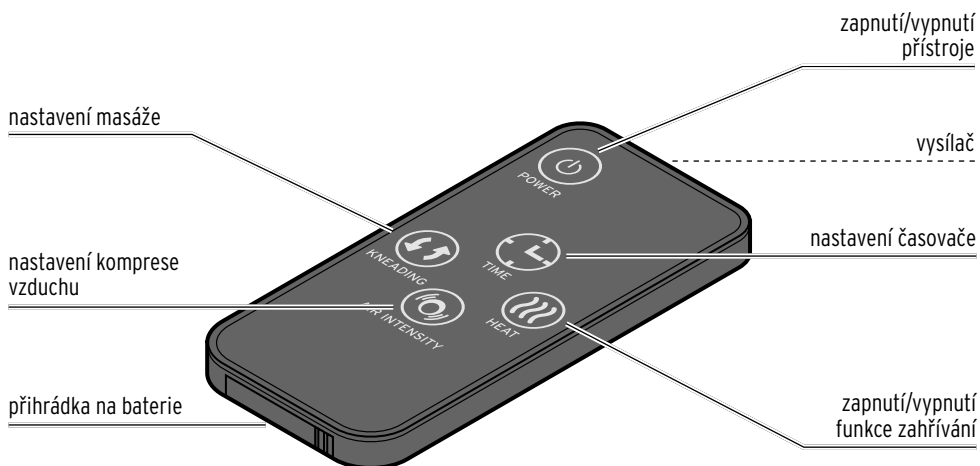

ovládací panel

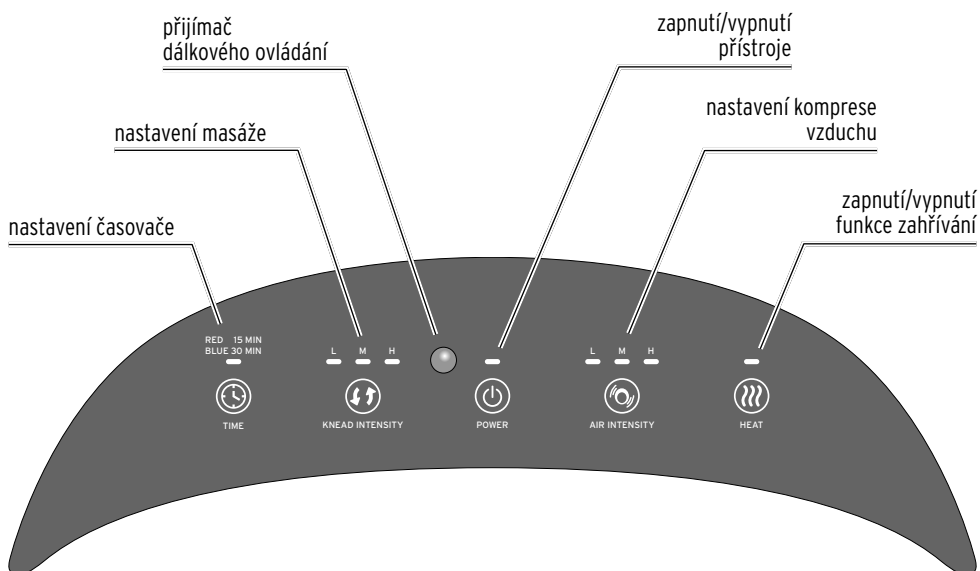

Uvedení do provozu


Použití




NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života
udušením/spolknutím

Obalový materiál se nesmí dostat do rukou
dětí. Okamžitě jej zlikvidujte.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Stáhněte ochrannou fólii z ovládacího panelu.

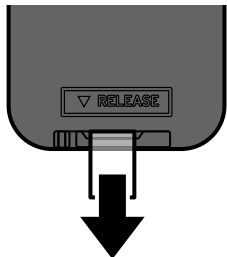

3. Vytáhněte izolační pásku z přihrádky na
baterie dálkového ovládání.

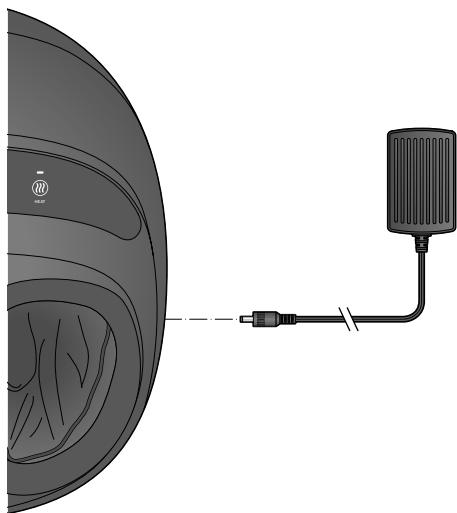

4. Zasuňte zástrčku síťového adaptéru do
připojovací zdičky na masážním přístroji.
5. Síťový adaptér zasuňte do dobře přístupné
zásuvky.
6. Zazní signální tón a kontrolka **Power** bliká.

POKYN - věcné škody

Přístroj je konstruován pro provoz v trvání
maximálně 30 minut. Před opětovným použitím
nechte přístroj po dobu minimálně 30 minut
vychladnout na okolní teplotu.

1. Posad'te se pohodlně na židli.
2. Zastrčte nohy úplně do vykrojení v přístroji.
3. Zaujměte uvolněnou polohu.

Zapnutí a vypnutí

▷ Pro zapnutí přístroje stiskněte

Zazní signální tón a kontrolka **Power** trvale svítí.

Je nastavena doba trvání masáže 15 minut
a zobrazí se na displeji. Intenzita funkce masáže
nohou a komprese vzduchu jsou nastave-
ny na nízký stupeň (**L**) a funkce zahřívání je
zapnutá.

Rozsvítí se příslušné kontrolky.

▷ Pro vypnutí přístroje stiskněte opět

Zazní signální tón, přístroj se zastaví a všechny
kontrolky zhasnou.

Nastavení časovače

Při zapnutí je přednastavena doba provozu
15 minut a příslušná kontrolka svítí červeně.

▷ Pro nastavení doby provozu 30 minut stisk-
něte

Kontrolka svítí modře.

▷ Pro opětovné nastavení doby provozu
15 minut stiskněte znovu

Pokud jste přístroj předčasně nevypnuli po-
mocí tlačítka , po uplynutí doby provozu
se automaticky vypne.

Nastavení rychlosti masáže nohou

Při zapnutí je nastavena nízká rychlost funkce masáže nohou (L).

- ▷ Pro změnu rychlosti masáže nohou stiskněte .

Rychlost se přepne na mírnou (M) > vysokou (H) > vypnuto > (L) atd.

Nastavení intenzity komprese vzduchu

Při zapnutí je nastavena nízká intenzita komprese vzduchu (L).

- ▷ Pro změnu intenzity komprese vzduchu stiskněte .

Intenzita komprese vzduchu se přepne na mírnou (M) > vysokou (H) > vypnuto > (L) atd.

Zapnutí a vypnutí funkce zahřívání

Při zapnutí je zahřívání zapnuté a kontrolka  trvale svítí.

- ▷ Pro vypnutí funkce zahřívání stiskněte .

Kontrolka  zhasne.

- ▷ Pro zapnutí funkce vyhřívání stiskněte znovu .

Použití dálkového ovládání

Všechny funkce můžete také ovládat pomocí dálkového ovládání.

- ▷ Nasměrujte dálkové ovládání vysílačem na přijímač a stiskněte příslušné tlačítko.

 Zapnutí a vypnutí přístroje.

 Nastavení časovače.


 Nastavení rychlosti masáže nohou.

 Zapnutí a vypnutí funkce zahřívání.

 Nastavení intenzity komprese vzduchu.

Výměna baterie

Pokud již přístroj nereaguje na dálkové ovládání, musí se vyměnit baterie.

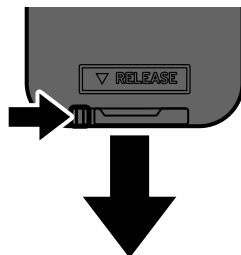


1. Stiskněte aretaci ve směru šipky a vytáhněte držák baterií.




Při dotyku baterií holýma rukama mohou na kontaktech ulpět nečistoty,

které mohou případně působit jako izolanty. Při vkládání baterií proto použijte suchou, měkkou utěrku.

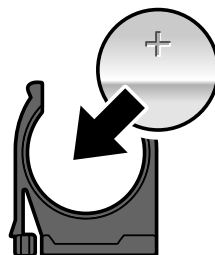

2. Vybité baterie vyměňte za nové. Přitom bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (symbol + ukazuje nahoru).

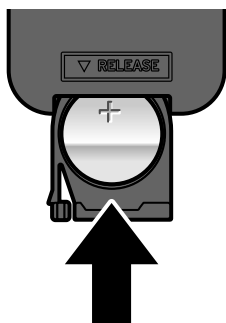

3. Držák baterie opět zcela zasuňte dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

Čištění a uchovávání



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem


- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Výrobek a síťový adaptér neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Před vložením zpět do přístroje a připojením přístroje k elektrické síti musí být textilní vložky úplně suché.
- V žádném případě nezapínejte masážní přístroj pro nohy a nepokoušejte se usušit textilní vložky pomocí funkce zahřívání přístroje.

1. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a nechte přístroj po několik minut chladnout.
2. Menší skvrny odstraňte hadříkem nebo vlhkou houbičkou.

Vyjměte textilní vložky z vykrojení pro nohy a vyperte je. Když chcete textilní vložky vyprat, postupujte následovně:

3. Rozepněte zipy na vykrojeních pro nohy.
4. Vytáhněte textilní vložky ven z vykrojení.

5. Textilní vložky perte ručně v teplé vodě s trochou jemného pracího prostředku.
6. Před vložením zpět do přístroje nechte textilní vložky zcela uschnout na vzduchu. Nepokládejte je pro usušení na topení a nesusušte je v sušičce na prádlo.

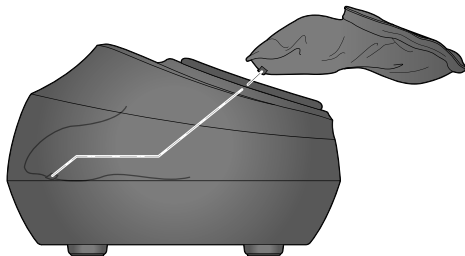

7. Textilní vložky vložte zpět do vykrojení na nohy.
 8. Textilní vložky a vykrojení pro nohy jsou opatřené suchými zipy. Dbejte toho, aby suché zipy při vložení zpět opět lícovaly a zapněte zipy.
- ▷ Uchovávejte přístroj na suchém, chladném místě.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje	• Je síťový adaptér zapojený do zásuvky? • Je připojovací zástrčka pevně zasunutá v připojovací zdířce?
Masážní hlavy rotují velmi pomalu.	• Netisknete nohy na masážní hlavy příliš silně? Nohy smí být jen položené.
Přístroj se během provozu vypne.	• Přístroj je přehřátý. Přístroj vypněte. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu. Teprve pak jej opět zapněte. • Byl přístroj 30 minut nepřetržitě zapnutý? Z bezpečnostních důvodů se přístroj po 30 minutách automaticky vypne. Nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.

Technické parametry

Model:	MD-50230B
Číslo výrobku:	647 030
Baterie:	1x CR2025/3 V (Li) Jmenovitá energie: 0,45 Wh (testováno podle UN 38.3)
Síťový adaptér:	
Model:	IVP1200-2500G
Výrobce:	(Xiamen Invcy Electronics Co., Ltd., 1F/3F-5F, BLDG 5, No. 943-5, Tonglong 2nd Rd, Torch Hi-tech Industrial Zone (Xiang'an), Xiamen, 361000, P.R. China)
Třída ochrany:	II 
Vstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	12,0 V 2,5 A 30,0 W
	(symbol  označuje stejnosměrný proud)
	(symbol  označuje polaritu zástrčky)
Účinnost v provozu Ø:	> 86,95%
při nízké zátěži (10 %):	> 85%
Příkon při nulovém zatížení:	< 0,1 W
Třída ochrany:	III 
Krátkodobý provoz:	30 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany (Německo)



Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodaná baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory

označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Model:

MD-50230B

Výrobce:

Premier Intertrade GmbH, Kirchenstraße 7, 21244 Buchholz, Germany (Německo)