


Masážní přístroj, vodotěsný

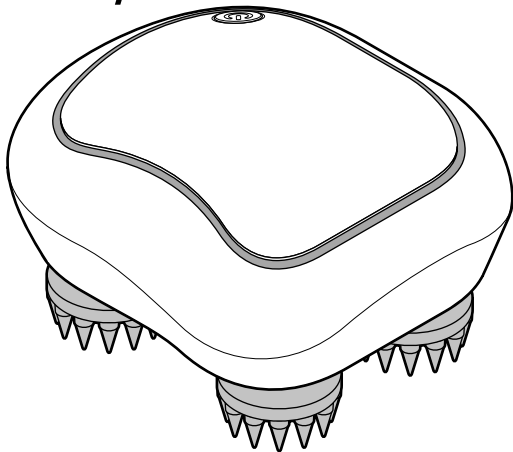

cs Návod k použití

Vážení zákazníci,

Váš nový masážní přístroj může uvolnit natažené svaly hlavy, šíje a trupu. Pomocí různých masážních hlavíc a volitelných rychlostí můžete masáž přizpůsobit svým individuálním potřebám a dopřát si pocit pohody. Masážní přístroj je vhodný pro použití ve sprše nebo ve vaně.

Obsah

- 2 K tomuto návodu
- 3 Bezpečnostní pokyny
- 7 Přehled (rozsah dodávky)
- 8 Nabíjení akumulátoru
- 9 Použití
- 10 Čištění a dezinfekce
- 11 Likvidace

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je určen pro vlastnoruční masáž za účelem zvýšení pohody.
- Výrobek je vhodný k použití ve sprše nebo ve vaně (stupeň krytí IPX7 – ochrana proti dočasnému ponoření).
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
Není vhodný pro kliniky, masérské salóny, wellness studia atd. Masážní přístroj není lékařský přístroj a neslouží k tlumení bolestí. V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.
- Přístroj používejte výhradně ...
 - ... k vnějšmu použití na těle.
 - ... k tomu účelu, pro který byl vyroben, a pouze takovým způsobem, který je uvedený v tomto návodu k použití.Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které je na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Abyste se vyvarovali poškození zdraví, naléhavě Vás žádáme, abyste v následujících případech přístroj nepoužívali:

- Masážní přístroj nepoužívejte ...
 - ... během těhotenství.
 - ... při patologických změnách nebo poraněních v oblasti těla, kterou chcete přístrojem masírovat

(např. při pohmožděninách, zánětech, otevřených ranách, výřezu meziobratlové ploténky apod.).

... po požití látek, které vedou k omezení schopnosti vnímání (např. léků proti bolesti, alkoholu apod.).

... na očích, v blízkosti očí, na hrtanu, na kostech nebo kloubech, v oblasti genitálií nebo ledvin, ani na jiných obzvláště citlivých částech těla.

... u zvířat.

... když ležíte v posteli.

... když je přístroj viditelně poškozený.

• Než začnete přístroj používat, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, především pak tehdy, když ...

... trpíte nějakou závažnou nemocí nebo jste po operaci.

... máte aplikovaný kardiostimulátor, nějaké implantáty nebo jiné pomůcky.

... máte trombózu.

... máte cukrovku.

... máte bolesti nejasné příčiny.

• Masáž by neměla trvat déle než 20 minut. Delší doba masáže může vést k nadměrné stimulaci svalů.

V některých případech pak může místo uvolnění dojít k natažení svalů.

• Pokud se během používání objeví bolesti nebo kožní vyrážka, masáž okamžitě ukončete a přístroj již nepoužívejte.

Dodržujte pokyny pro bezpečné používání:

• V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované odborné opravně.

• Nikdy nenechávejte přístroj delší dobu na jednom místě. Provádějte krouživé pohyby.

• Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.

Samotný masážní přístroj je chráněn proti vniknutí vody, nabíjecí držák však ne.

Při nabíjení masážního přístroje dodržujte tyto pokyny:

- Neponořujte nabíjecí držák do vody ani do jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se nabíjecího držáku vlhkými rukama a nepoužívejte jej ve venkovním prostoru ani v místnostech s vysokou vlhkostí. Přístroj nenabíjejte v blízkosti vody. Do nabíjecího držáku vkládejte pouze suchý masážní přístroj. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud nabíjecí držák spadl během nabíjení do vody, nesahejte na něj ani se jej nepokoušejte z vody vytáhnout! Ihned vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Než znovu zapojíte síťový adaptér do zásuvky, nechte

přístroj, micro USB nabíjecí kabel i síťový adaptér zcela oschnout.

- Použijte vhodný USB síťový adaptér (viz „Technické parametry“). Nabíjecí držák připojte pouze k zásuvce nainstalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, pokud během nabíjení dojde k nějaké poruše, resp. jakmile je přístroj plně nabitý. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud samotný přístroj nebo nabíjecí držák vykazuje viditelná poškození nebo pokud spadl na zem.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Masážní přístroj obsahuje lithium-iontový akumulátor. Akumulátor se nemůže ani nesmí vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Výměna je možná


pouze za stejný akumulátor nebo za akumulátor stejného typu. Pokud je akumulátor vadný, obraťte se na odborný servis.

- Akumulátory se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.
- K nabíjení výrobku používejte pouze originální nabíjecí držák.


POZOR na poranění a věcné škody

- Přístroj chraňte před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)

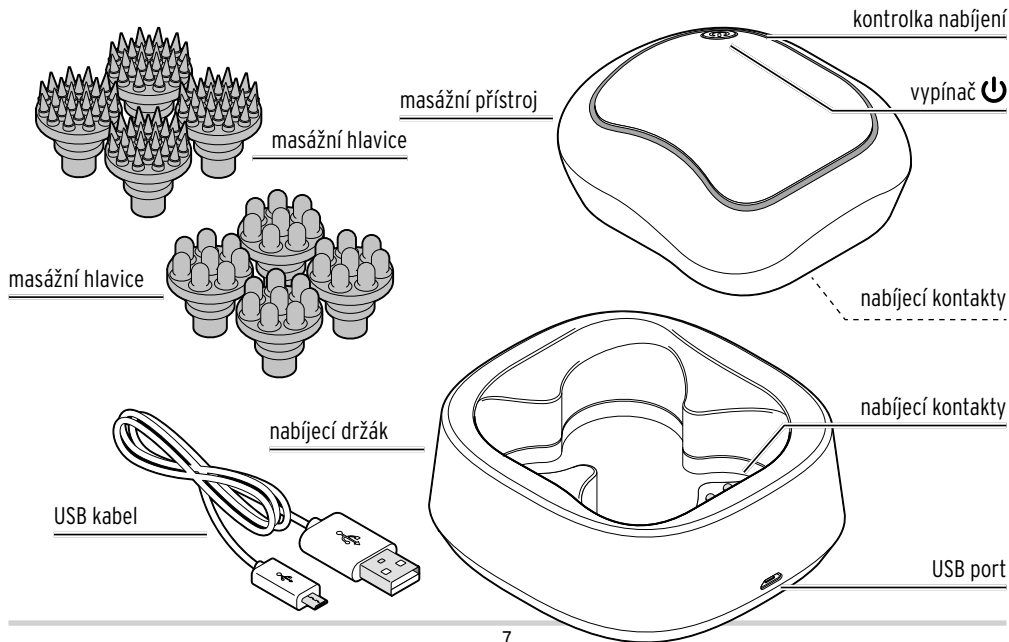

Nabíjení akumulátoru

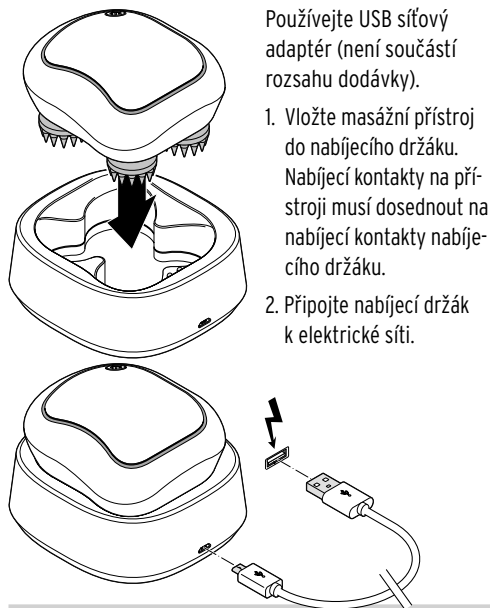

Používejte USB síťový adaptér (není součástí rozsahu dodávky).

1. Vložte masážní přístroj do nabíjecího držáku. Nabíjecí kontakty na přístroji musí dosednout na nabíjecí kontakty nabíjecího držáku.
2. Připojte nabíjecí držák k elektrické síti.

Kontrolky během nabíjení blikají.

Jakmile je akumulátor plně nabitý, kontrolky trvale svítí.

Doba nabíjení vybitého akumulátoru: cca 2-3 h

Doba provozu při plně nabitém akumulátoru: cca 1,5 h



Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze napůl. Před prvním použitím proto akumulátor plně nabijte.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při pokojové teplotě.


Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co nejdéle, nabíjejte akumulátor každé dva měsíce do plné kapacity, i když se nepoužívá.

Použití

Zapnutí/vypnutí


1. Vyjměte masážní přístroj z nabíjecího držáku.
Kontrolky zhasnou.
 2. Zapněte přístroj stisknutím vypínače .
Přístroj se vždy spustí s nejpomalejší rychlostí, kontrolky svítí.
 3. Pro změnu rychlosti vždy krátce stiskněte vypínač  ...
Rychlost se postupně mění v tomto pořadí ...
... pomalá (kontrolka blikne 1x)
... střední (kontrolka blikne 2x)
... rychlá (kontrolka blikne 3x)
a znovu od začátku.
- ▷ Pro opětovné vypnutí masážního přístroje podržte vypínač  stisknutý cca 3 vteřiny.

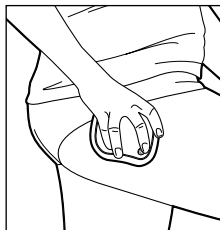

4. Přiložte si masážní přístroj k místu na těle, které chcete masírovat. Můžete měnit intenzitu masáže lehkým nebo silnějším přitisknutím přístroje na kůži.

Výměna masážních hlavice

- ▷ Masážní hlavice jednoduše sejměte směrem nahoru a nasadte jiné masážní hlavice.

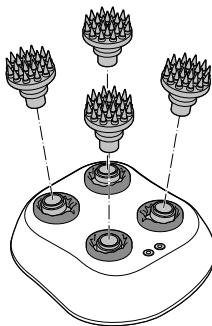

Čištění a dezinfekce

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Nepoužívejte ani žádný běžně dostupný dezinfekční prostředek.

- ▷ Masážní přístroj - včetně nasazených masážních hlavíc - můžete opláchnout pod tekoucí vodou.
- ▷ Masážní hlavice můžete umývat teplou vodou a běžně dostupným prostředkem na mytí nádobí.
- ▷ V případě potřeby otřete nabíjecí držák mírně navlhčeným hadříkem.
- ▷ Pro dezinfikování můžete masážní hlavice otřít hadříkem navlhčeným ethylalkoholem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Technické parametry

Model:	622 403
Akumulátor:	lithium-iontový (testováno podle UN 38.3) 3,7 V  1200 mAh Jmenovitá energie: 5 Wh (symbol  označuje stejnosměrný proud)
USB vstup:	5 V  1 A
Doba nabíjení:	cca 2-3 h
Doba provozu:	cca 90 minut (při plně nabitém akumulátoru)
Třída ochrany:	III 
Výkon:	5 W
Stupeň krytí:	IPX7 (ochrana proti krátkodobému ponoření do vody)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Nizozemsko)



Číslo výrobku: 622 403
